




1 Наложить электроды на конечности

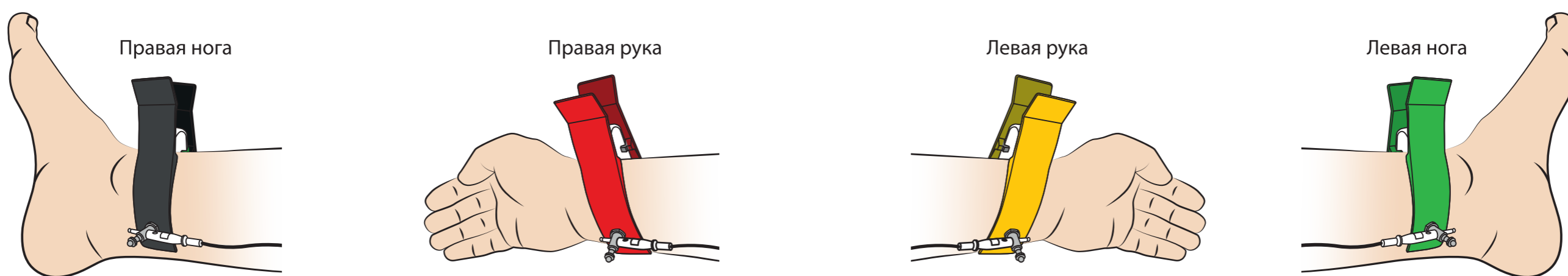


2 Пальпацией определить край яремной вырезки грудины

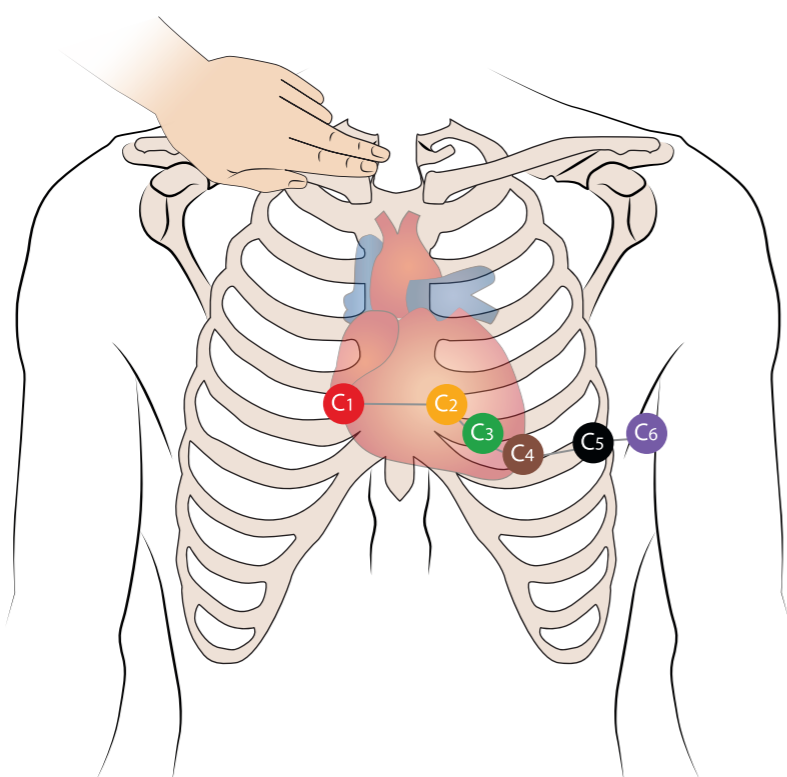


6 С4 располагается в пятом межреберье по среднеключичной линии

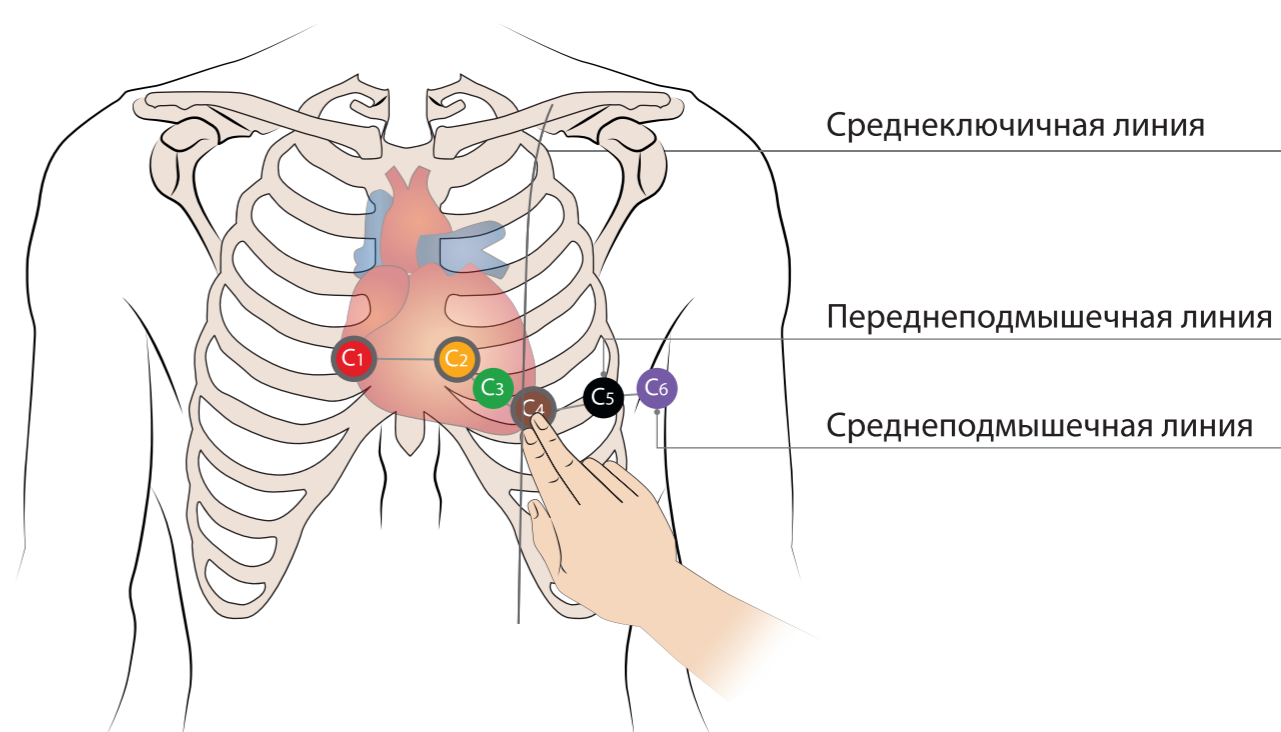

3 Определить положение угла грудины

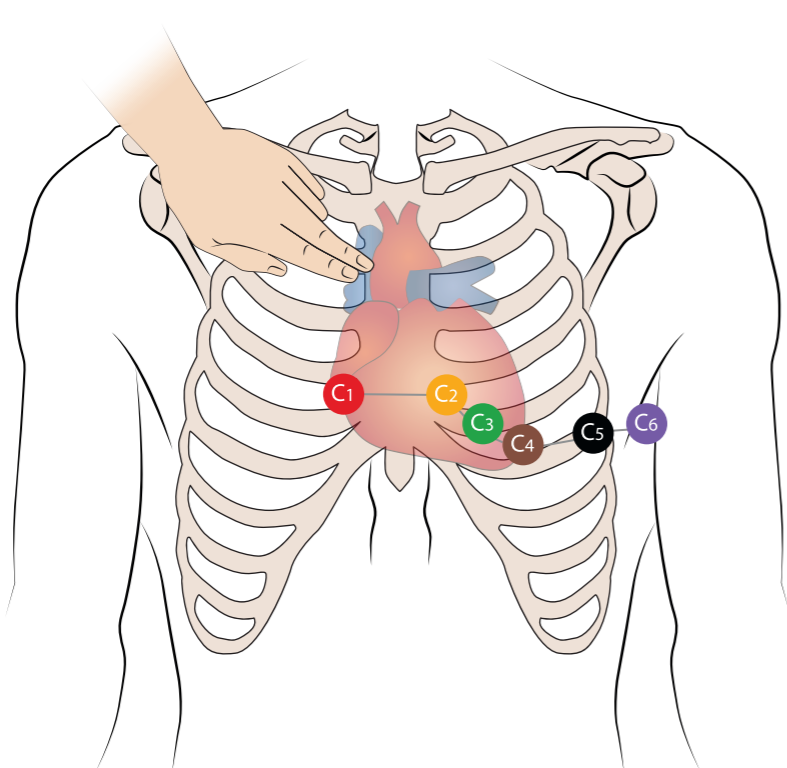


7 С3 поместить точно посередине прямой линии, соединяющей электроды С2 и С4

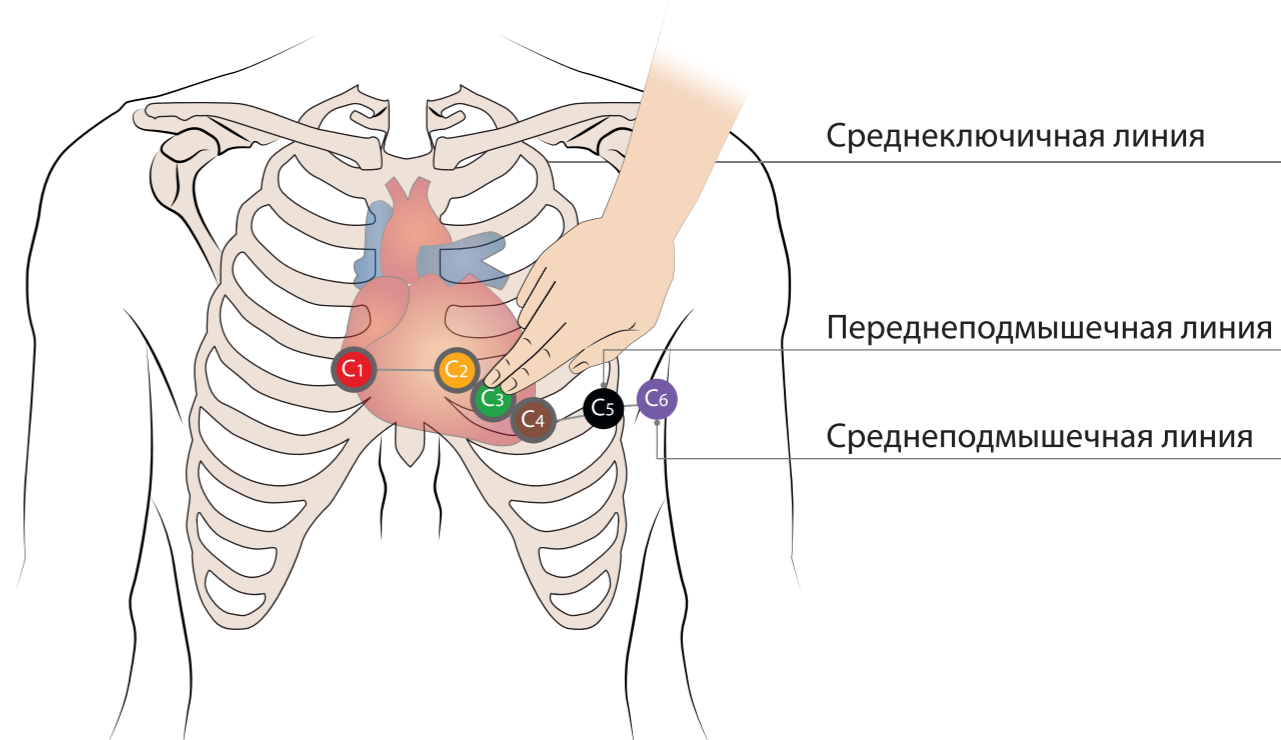

4 От этого положения отсчитать III и IV межреберья

5 Электроды С1 и С2 должны быть размещены в четвертом межреберье по краям грудины справа и слева от нее

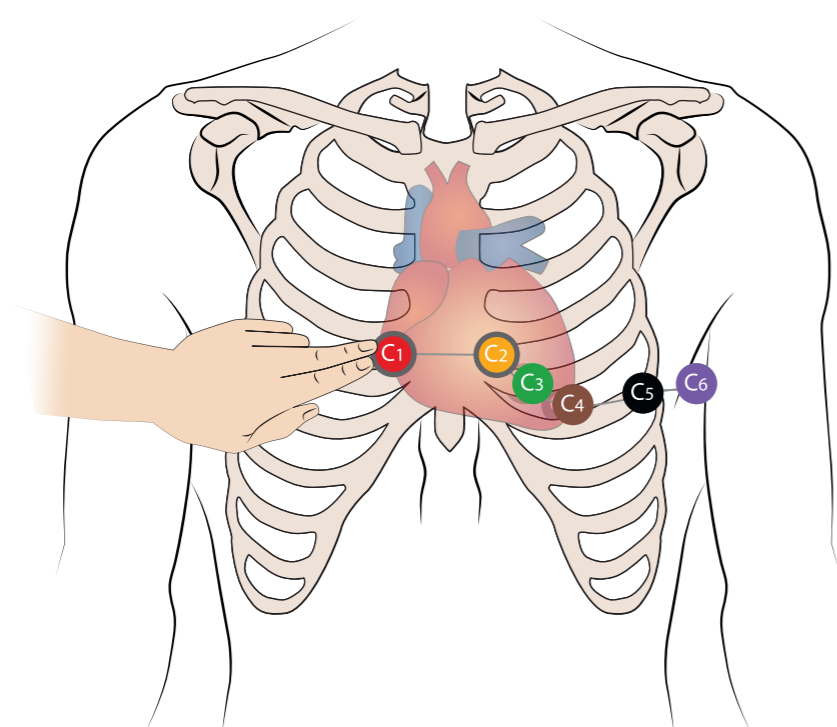

8 Электроды С5 и С6 размещаются по горизонтальной линии на уровне С4 (не поднимать вверх)

